


SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- ⚠ WARNING:** **Important: Read and understand these instructions before installing or using the Walker Tray. Ensure that the Walker Tray is installed as described in the following paragraphs before use. If the Walker Tray is not properly installed, personal injury and/or property damage could result.**
- ⚠ WARNING:** **GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation or use of this product.**
- ⚠ WARNING:** **If components are damaged or missing, contact your Graham-Field Health Products dealer immediately. DO NOT use substitute parts.**
- ⚠ WARNING:** **Do not sit, push down, or lean on the Walker Tray; this could cause the Walker Tray to collapse, resulting in loss of support.**

WALKER TRAY INSTALLATION (REFER TO PICTURE)

- ⚠ WARNING:** **Before installing the Walker Tray, ensure that the walker is completely unfolded and locked in open position.**

1. With the Walker Tray in a collapsed position between the brackets, face the front of the walker. Grasp the Walker Tray by the sides and clamp the brackets onto the walker's front frame, positioning the lower clamps on top of the walker's lower cross brace.
2. Ensure that the Walker Tray's lower clamps are resting on the walker's lower cross brace, and that all four clamps are securely attached.
3. Pull the Walker Tray out with your thumb and the tips of your fingers; rotate it upward and lock it into place, as shown at right.

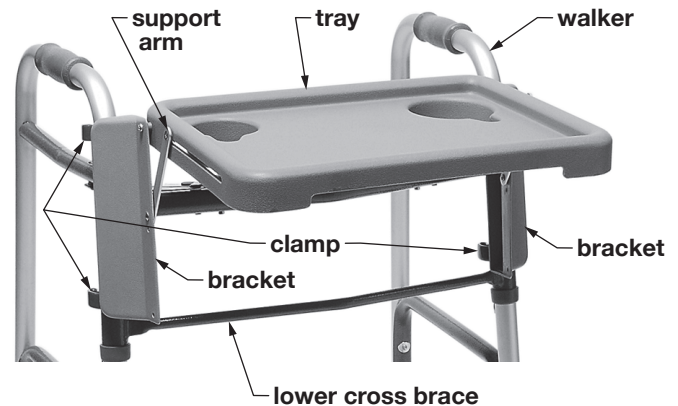

603900A Walker Tray

- ⚠ WARNING:** **Ensure that the Walker Tray is securely installed as instructed before use.**
 - 4. When the Walker Tray is no longer in use, lift it up, push in on the tops of both support arms while pushing the tray forward, and rotate the tray down.
- ⚠ WARNING:** **Do not place your hand or fingers between the tray and the bracket.**

WARRANTY

GF Health Products, Inc. warrants the Lumex 603900A Walker Tray for a period of one year for defects in workmanship and materials. During the warranty period, defective items will be repaired or replaced at GF Health Products, Inc.'s option at no charge.



DIRECTIVAS DE SEGURIDAD – LEE ANTES DE USO

- ⚠ **AVISO:** **Importante: Lee y entiende todas las instrucciones antes de instalar o usar esta Bandeja para Andador. Asegure que la Bandeja para Andador está instalado como descrito en las siguientes párrafos antes de uso. Si la Bandeja para Andador no está instalada propiamente, puede resultar en lesión personal y/o daño.**
- ⚠ **AVISO:** **GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o lesión causado por instalación, ensambla o uso impropio de este producto.**
- ⚠ **AVISO:** **Si los componentes están dañados y si le faltan, llame a su distribuidor de products de Graham-Field Health Products. NO debe de usar partes sustituto.**
- ⚠ **AVISO:** **No debe sentarse, empujar en o inclinarse en la Bandeja para Andador; esto puede causar daño a la Bandeja para Andador.**

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA PARA ANDADOR (REFIERE A LA FOTO)

- ⚠ **AVISO:** **Antes de instalar la Bandeja para Andador asegure que el andador está completamente abierto y fijado en la posición abierto.**

1. Con la Bandeja para Andador en su posición colapso dentro de los soportes, póngalo en la parte del frente del andador. Agarre la Bandeja para Andador por los lados y ponga los soportes en el marco del andador, posicionando las abrazaderas de abajo encima del apoyo cruzado inferior del andador.
2. Asegure que las abrazaderas inferiores de la Bandeja para Andador están encima en el apoyo cruzado inferior del andador y que todas las abrazaderas están fijados seguros.
3. Jale la Bandeja para Andador con su dedo pulgar y las puntas de sus dedos; rotarlo hacia arriba y que esté fijado, como enseñado a la derecha.



603900A Bandeja para Andador

- ⚠ **AVISO:** **Asegure que la Bandeja para Andador está seguramente instalado como instructado antes de uso.**
- 4. Cuando la Bandeja para Andador no va estar en uso, levántelo, empuje hacia dentro en los soportes en los lados de la bandeja y empuja la bandeja delante y rotealo abajo.
- ⚠ **AVISO:** **No debe poner su mano o dedos entre la bandeja y los soportes.**

GARANTÍA

GF Health Products, Inc. garantía la Bandeja para Andador para un periodo de un año por defectos en habilidad y materiales. Durante el periodo de garantía, artículos defectivos pueden ser arreglados y cambiadas por el fabricante a no precio.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>